


MEZCLADORES Y AGITADORES




PARA RECIPIENTES DE ACERO INOXIDABLE

Mezcladores diseñados a pedido para las industrias alimenticia, cosmética, biotécnica y farmacéutica

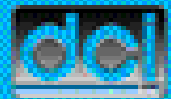


Los diseños disponibles incluyen.

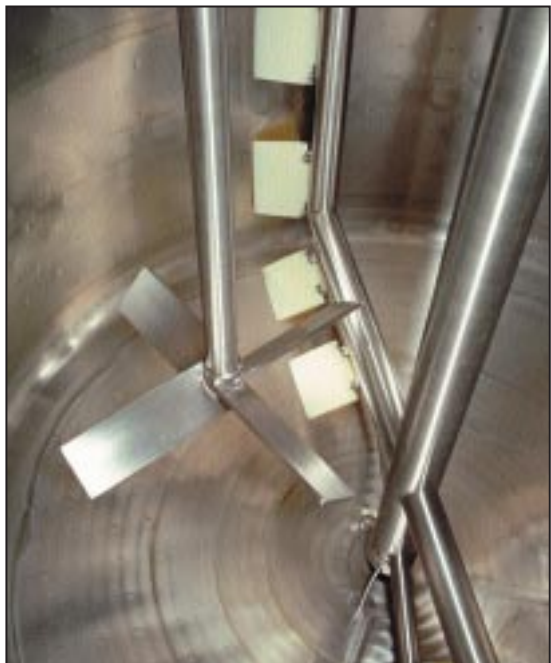


1-Raspado inferior y lateral
 2-Barrido inferior y lateral
 -Barrido inferior (no se muestra)
 -Barrido inferior y raspado lateral (no se muestra)


3-Tipo turbina radial
 4-Tipo turbina axial
 5-Tipo turbina con armazón de protección
 6-Tipo hélice
 7-Tipo dispersador

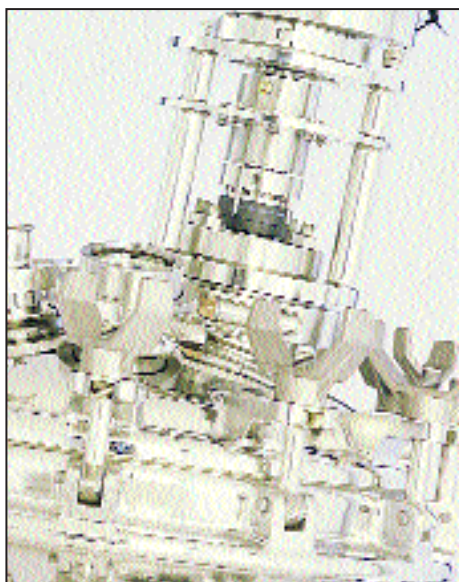

Alojamientos de sellos autoclavables

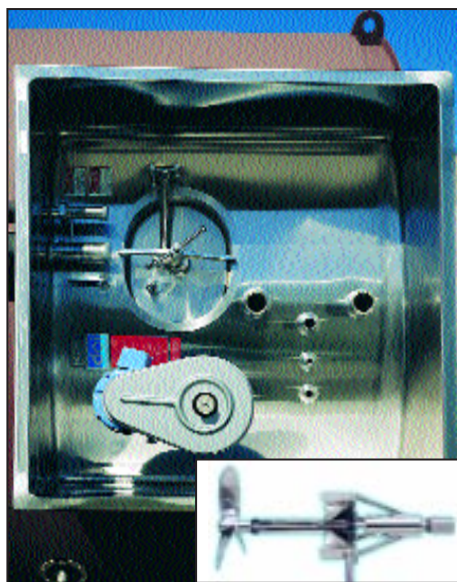


Agitadores laterales y CIPA-H

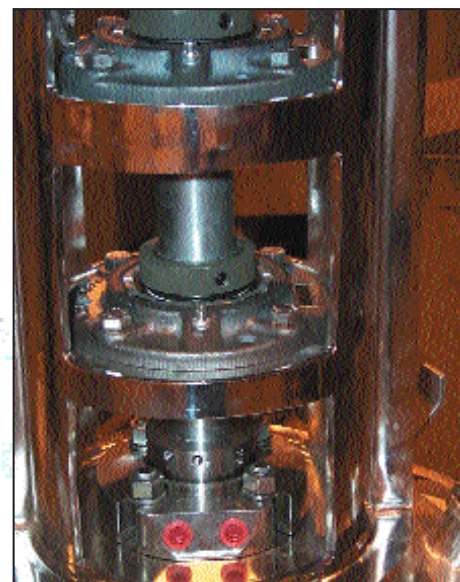

Cojinetes y burletes mecánicos



Motores y montajes

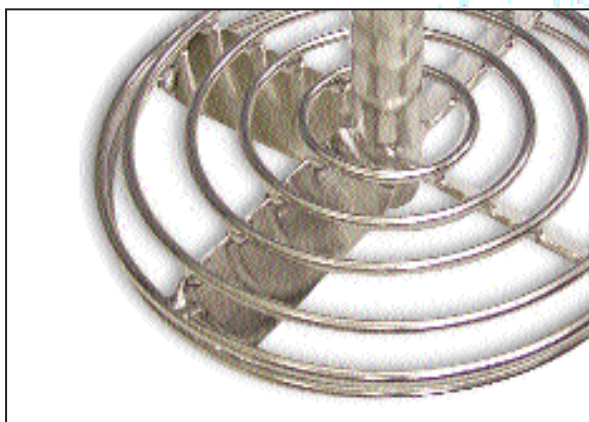

Turbinas axiales y radiales con armazón de protección



Mezcladores de la serie Pharmix 2000 de DCI


Más de 40 años satisfaciendo las demandas más exigentes de virtualmente todas las industrias

- Diseño sanitario: Impulsores con burletes soldados y acabado electropulido
- Sellos del eje en seco, purgables y de mecánica doble
- Controles integrados
- Construidos conforme a las normas GMP y 3A actuales
- Agitadores de .25 a 300 HP
- Agitadores y tanques diseñados simultáneamente para garantizar su funcionamiento conjunto

Completa variedad de diseños para todo tamaño, viscosidad y tipo de agitación o condiciones de servicio.



Velocidades de rotación para varios impulsores
431 r.p.m.
Gravedad específica = 1.0, Viscosidad = 1

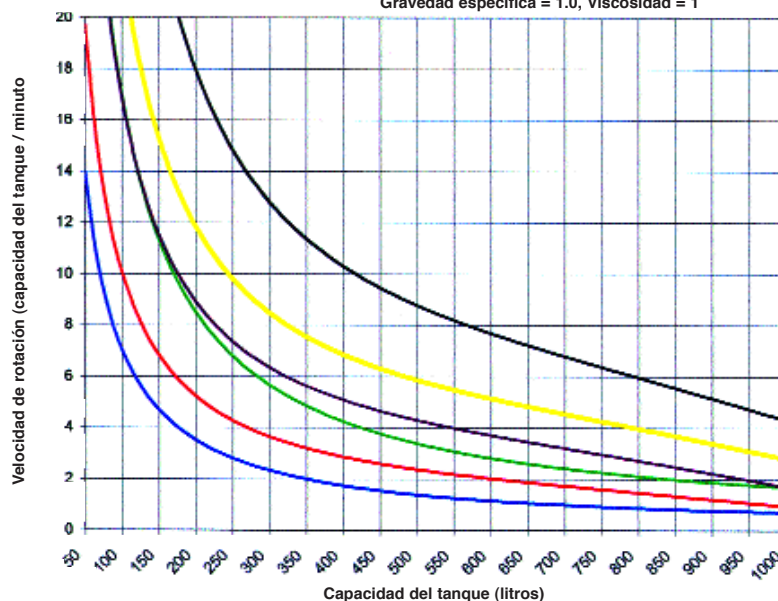

- (2) Turbinas de 8" (20.3 cm), 3/4 HP
- (1) Turbina de 8" (20.3 cm), 1/2 HP
- (1) Hélice marina de 8" (20.3 cm), 1/4 HP
- (2) Turbinas de 6" (15.2 cm), 1/2 HP
- (1) Turbina de 6" (15.2 cm), 1/4 HP
- (1) Hélice marina de 6" (15.2 cm), 1/4 HP

Controles de DCI:

Sistemas integrados con funciones que incluyen :



- Pantalla y controles de RPM de los agitadores
- Accionamiento de válvulas
- Celdas de peso
- Indicadores de nivel
- Paneles de acero inoxidable NEMA 4X
- Control e indicador de temperatura



Cuando usted solicita un agitador construido por DCI, obtiene:

- Un solo fabricante
Una combinación rentable de fabricante de tanque y mezclador que elimina los problemas de coordinación, planificación y ajuste.
- Ejecución de las pruebas de funcionamiento en la fábrica
Procesos y productos específicos diseñados para garantizar su rendimiento.
- Atomizador CIP debidamente probado y certificado
Diseño lavable y pruebas CIP que verifican la cobertura.
- Panel único de instrumentos de control
Desde controladores simples de velocidad VFD hasta sofisticados sistemas PLC, las funciones del proceso se ajustan desde un único panel de control.



DCI, Inc.
Sede Central
600 North 54 Avenue (56303)
P.O. Box 1227 (56302)
St. Cloud, MN
Teléfono: 320-252-8200
Fax: 320-252-0866

DCI of Utah, Inc.
Cedar City Division
1024 N. Production Road
Cedar City, UT 84720

Web Site: <http://www.dciinc.com>
E-mail: dci@uslink.net